

Behandeling

# Verzorging van uw wond met Prevena na een gewrichtsvervangende operatie

Na een operatie waarbij een gewricht is vervangen door een prothese, gaat u naar huis met een zogenaamd 'Prevena -systeem'.

Uw arts heeft het Prevena- systeem voorgeschreven om uw wond te helpen beschermen door:

- wondranden bij elkaar te houden;
- bescherming te bieden tegen externe infectiebronnen;
- vocht te verwijderen van de wond.

Het Prevena- systeem bestaat uit:

- Een therapie- unit die negatieve druk uitoefent op het wondverband:



- Een wondverband met een waterbestendige afdeklaag die wordt geplaatst op de wond:



- Een verbindingsslang




- Een opvangbeker waarmee het vocht uit de incisie/ wond wordt opgevangen.
- Een draagtas met verstelbare banden.
- 

### **Is het pijnlijk?**

Wanneer u de Prevena-pomp de eerste keer inschakelt, kan dit een licht trekkend gevoel geven. Vraag advies aan uw behandelaar als de pijn blijft.

# Gebruiksaanwijzing Prevena systeem

## Aan- en uitzetten

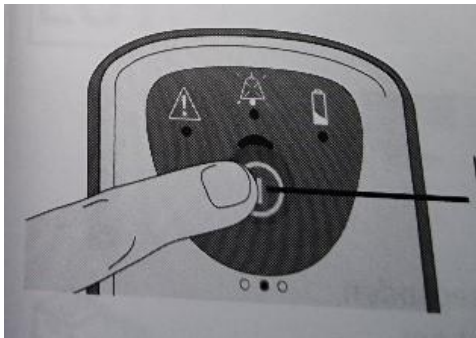

Controleer of het wondverband vacuüm wordt getrokken. Het verband voelt niet zacht, maar juist stevig aan.

*Inschakelen: houd de knop 2 seconden ingedrukt.*

*Uitschakelen: houd de knop 5 seconden ingedrukt.*



*Is het wondverband niet ingedrukt?*

- Controleer dat de slang niet geknikt en afgekneld wordt.
- Controleer op lekkage.

## Douchen en wassen


De Prevena-pleister is waterbestendig. U mag een snelle douche nemen. Dompel het wondverband niet onder in water. Zorg dat de therapie-unit uit de buurt van water wordt gehouden. Verstoor het wondverband niet tijdens het afdrogen. Dep voorzichtig het verband droog.

## Wanneer moet het verband vervangen worden?

Het verband mag maximaal 7 dagen worden gebruikt. Op de 7e dag wordt de pomp en het verband verwijderd op de polikliniek Orthopedie. U heeft daarvoor een controle-afspraak gekregen. Komt er voor die tijd vocht onder de pleister uit? Neem dan contact op

met de polikliniek Orthopedie.

## Indicatoren en waarschuwingen

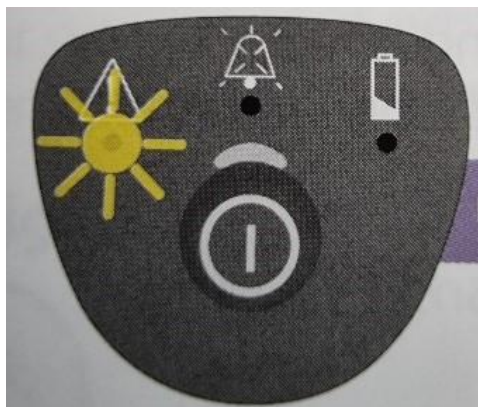

*Lekwaarschuwing*

*1 pieptoon, 1 continue brandend lampje*


- Controleer alle connectoren op lekkage.
- Zorg ervoor dat de opvangbeker goed is vergrendeld en de nokjes aan de zijkant gelijk liggen met het apparaat.
- Druk de rand van het wondverband goed aan.
- Gebruik prevena- foliestrips of tegaderm om lekkages te dichten.



*Waarschuwing opvangbeker/ canister vol*

*2 pieptonen, 1 continue brandend lampje*


- Controleer het vochniveau in de opvangbeker.
- Beker vol: schakel unit uit, vervang de opvangbeker, schakel unit in.
- Beker niet vol: controleer op knikken en afknellingen in de slang

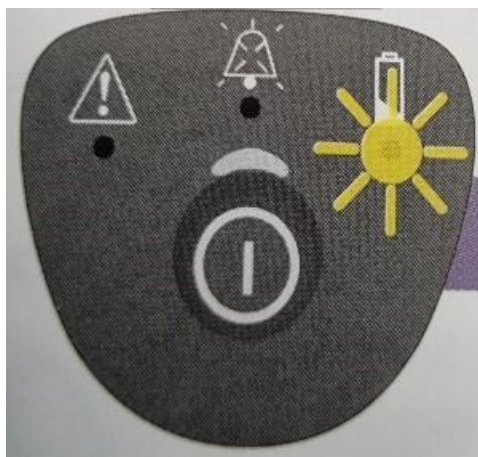

Waarschuwing batterij bijna leeg

1 pieptoon en 1 continue brandend lampje

- Schakel de unit uit.
- Vervang de batterijen.
- Schakel de unit in.

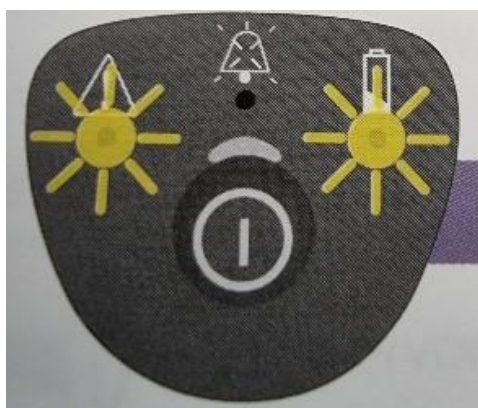

Waarschuwing systeemfout

Een herhalend en luider wordende pieptoon en 2 continue brandende lampjes

- Houd de aan- en uitknop 5 seconden ingedrukt om uit te schakelen.
- Houd de aan- en uitknop 2 seconden ingedrukt om weer in te schakelen.



Levensduur van apparaat verlopen

3 brandende lampjes geven aan dat de levensduur is verlopen. Er klinkt een herhaalde pieptoon gedurende 15 seconden, waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.

- Levensduur = 192 uur (8 dagen)

Met wie neemt u contact op bij problemen met het Prevena systeem?

Poliverpleegkundige: (073) 553 52 86 (bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 15.30 uur).

Verpleegafdeling Orthopedie: (073) 553 25 21 (van 15.30 tot 8.00 uur en op zaterdag en zondag).

## Betrokken afdelingen

Orthopedie (<https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/orthopedie>)

Code ORP-116